

機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工用電気エンジン 38611000

ベゴ パラスコープM

【警告】

- ①本品は歯科補綴物作成用の電気エンジンである。
- 【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ②本品の操作は習熟したもの以外は使用しないこと。
- ③使用者の安全を守り、本品を正しく使用するために注意事項を必ず守ること。
- ④故障したときは、適切な指示を行い、修理は専門家に任せること。


【禁忌・禁止】

次の行為は危険なため行わないこと。

- ①本品の改造
- ②不具合、故障状態での使用
- ③未整備状態での使用
(未整備状態とは、定期点検や日常の点検を行っていない状態をいう)

【形状・構造及び原理等】

形状：

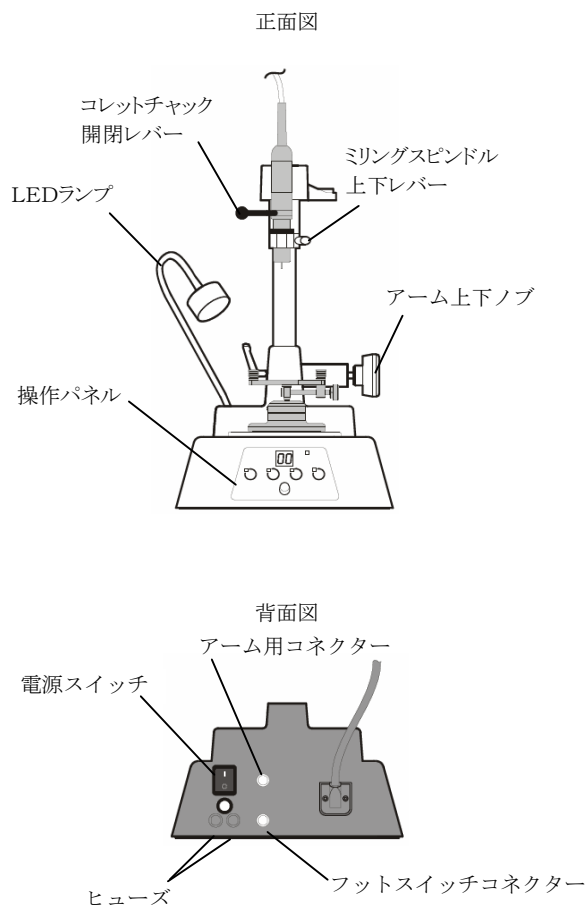

動作原理：電気エンジンを関節式のアームで支持し、上下左右方向に動かして切削作業を行う。

【使用目的、効能又は効果】

歯科用バー、リーマー等を電気エンジンで回転させ、歯科補綴物の切削や穴あけ、研磨を行うための歯科技工用器具である。

【品目仕様等】

性能

- 1) 定格電圧：100-120V (50/60 Hz)
- 2) 回転スピード：1,000-50,000rpm
- 3) ミリングスピンドル定格出力：160VA
- 4) 外形寸法：高さ 488-570mm×幅 290mm×奥行き 310mm
- 5) 重量：8.9Kg

【操作方法又は使用方法等】

- 1) 取り付け、設置
 - ①本品の取り付け、設置は専門知識を持った担当者が行うこと。
 - ②本品の詳細な取り付け、設置は付属の取扱説明書を参照すること。
 - ③本品は安定した、しっかりした台の上に設置すること。
- 2) 操作方法又は使用方法
本品の詳細な操作方法および使用方法は、付属の取扱説明書を必ずお読みください。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

- 1) 使用前の注意事項
 - ①アースが完全に接続されていることを確認すること。
- 2) 使用中の注意事項
 - ①本品から異臭、異音が出るときは速やかに本品の電源を切り、弊社にご連絡ください。
 - ②本品全般に異常が起きないか絶えず監視すること。
 - ③外装温度が上昇するため、体が本品に触れないようにすること。
- 3) 使用後の注意
 - ①本品の温度が下がってから、次回からの使用に支障のないように清拭すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1) 貯蔵・保管方法
 - ①水のかからない場所に保管すること。
 - ②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない場所に保管すること。
 - ③傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対応する安定状態に注意すること。
 - ④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
 - ⑤本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- 2) 耐用期間
記載の耐用期間は自己認証（当社データ）による。
製造出荷後、正規の保守点検を行った場合に限り 10 年間とする。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書「清掃とメンテナンス」をご使用前に必ずお読みください。

- 1) 本品及び付属品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) 長期間使用しなかった本品を再使用する場合は、使用前に必ず本品が正常、かつ安全に作動することを確認すること。

【包装】

本体 1 台

【付属品】

ミリングスピンドル(コレットチャック φ2.35mm 装着済み) 1
ミリングスピンドル用カラー(本体アームに装着済み) 1
ピン φ2.35mm(ミリングスピンドルに装着済み) 1
クイル(コレットチャック φ2.35mm 装着済み) 1
クイル用カラー 1
クイル用コレットチャック φ3.0mm 1
コレットチャックレンチ 1
モデルテーブル 1
フットスイッチ 1
連結ケーブル 1
クリーニングブラシ 1
六角レンチ 1
ヒューズ 2

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口 88

電話番号：075-257-7255（西日本営業所）

：03-3836-3691（東日本営業所）

：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前 10：00～午後 5：00

F A X：075-257-7256

製造元：ベゴ ブレーマ ゴールドシュレーゲライ
ウイルヘルム ヘルブスト ゲ エム ベ
ハ ウンド コ カゲ

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH &
Co. KG

国名：ドイツ

販売元：株式会社アイキャスト

住所：〒604-0847

京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町 513

京都第一生命泉屋ビル 8F

電話番号：075-257-7270

F A X：075-257-7271